

Comment utiliser l'auto-injecteur EpiPen® (adrénaline)

EpiPen® est utilisé pour le traitement d'urgence des réactions allergiques sévères.



Tube de rangement

Pointe orange = sortie de l'aiguille.

! Ne jamais poser votre pouce, les doigts ou la main sur cette pointe

Capuchon de sécurité bleu.

! Ne pas enlever ce capuchon avant d'être prêt à l'injection

Retirez l'auto-injecteur de son tube de rangement et suivez les trois étapes suivantes :




1

! Tenir l'auto-injecteur par le centre, jamais aux extrémités

• Tenez fermement le corps de l'auto-injecteur ; la pointe orange (côté aiguille) vers le bas.

• **Enlevez le capuchon de sécurité bleu, juste avant l'injection.**

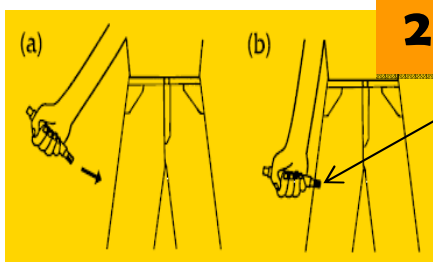

2

Pointe orange
= sortie de l'aiguille

! Injecter uniquement dans la face extérieure de la cuisse

• Orientez la pointe orange vers la face extérieure de la cuisse (à environ 10 cm).

En position perpendiculaire à la cuisse, enfoncez fermement la pointe orange dans la cuisse jusqu'à ce que vous entendiez un « dé clic ».

Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour administrer le produit.

L'administration peut être effectuée à travers un vêtement.



3

Pointe orange = sortie de l'aiguille

• **Maintenez l'auto-injecteur sur la cuisse pendant 10 secondes.**

Retirez l'auto-injecteur, puis massez l'endroit de l'injection.

• **L'injection est terminée;** la fenêtre d'observation située sur le corps de l'auto-injecteur apparaît foncée.

Protection intégrée contre l'aiguille



Avant injection



Après injection

• Après l'injection, la pointe orange s'étend pour couvrir l'aiguille d'injection qui n'est donc plus visible.

• L'auto-injecteur peut être replacé en toute sécurité dans son tube de rangement mais celui-ci ne pourra plus se fermer.

• Rapportez à l'hôpital ou à la pharmacie le stylo usagé pour une élimination adéquate.

Après l'injection, une prise en charge médicale immédiate est nécessaire. Composez le 15 si vous vous trouvez en France ou rendez vous dans un service médical d'urgence.